



widya

wish

BUKU MANUAL

Pindai untuk melihat buku manual dalam bahasa lainnya :



atau kunjungi link di bawah ini :


http://bit.ly/wish_manual

Informasi Produk

WISH (Widya Smart and Health Watch) merupakan sebuah jam tangan pintar berbasis Artificial Intelligence (AI), yang dapat dimanfaatkan sebagai alat pemantau kesehatan serta pencatatan laporan kesehatan penggunanya dan terintegrasi dengan ponsel cerdas melalui Bluetooth. Selain itu, pengguna juga dapat berkonsultasi baik melalui chat maupun panggilan video dengan Aplikasi Kesehatan yang dipilih untuk menanyakan mengenai kondisi kesehatannya.

- Jam tangan harus diisi daya minimal 2 jam sebelum pemakaian. Untuk memudahkan pengguna dalam menemukan jam, produk dilengkapi dengan fitur "Find a Watch".
- Untuk menghindari penyalahgunaan oleh selain dari pemilik jam, produk dilengkapi dengan fitur "Unbind Device".
- Fitur ini mengharuskan smartwatch agar hanya dapat terkoneksi dalam satu aplikasi. Oleh karena itu, jika smartwatch hendak digunakan menggunakan aplikasi lain, pengguna harus melakukan "Unbind Device".

WISH Component:

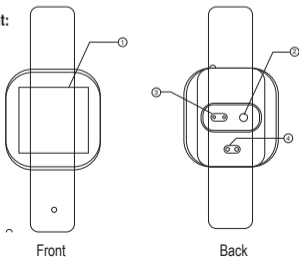

Keterangan WISH

- **Layar Sentuh** : Digunakan untuk mengoperasikan menu di smartwatch
- **Sensor Temperatur** : Menghitung suhu di pergelangan tangan dan dikonversikan ke suhu tubuh
- **Sensor Detak Jantung** : Menghitung detak jantung
- **Port Pengisian Daya** : Mengisi daya baterai
- **Tali Pengikat Jam** : Mengeratkan jam pada pergelangan tangan dengan tepat
- **Sentuh Atas – Bawah** : Untuk berpindah dari menu satu ke menu lainnya
- **Sentuh Kanan** : Untuk kembali ke menu sebelumnya
- **Tahan 3 detik** : Untuk mengaktifkan beberapa operasi seperti menghidupkan dan mematikan perangkat, mengganti tampilan layar smartwatch, menghitung suhu, menghentikan proses perhitungan waktu olahraga.

Penjelasan Fitur WISH:

1. Pemantau Tidur

Fitur ini digunakan untuk mengukur lama tidur.

2. Pengukuran Suhu Tubuh

Fitur ini digunakan untuk mengukur suhu.

3. Detak Jantung

Fitur ini digunakan untuk mengukur detak jantung.

4. Tekanan Darah

Fitur ini digunakan untuk mengukur tekanan darah.

5. Oksigen Dalam Darah

Fitur ini digunakan untuk mengukur kadar oksigen dalam darah.

6. Gula Darah

Fitur ini digunakan untuk mengukur kadar gula dalam darah.

7. Kolesterol

Fitur ini digunakan untuk mengukur kadar kolesterol.

8. Tingkat Stres

Fitur ini digunakan untuk mengukur tingkat stres.

9. Kegiatan Luar Ruangan

Fitur ini digunakan untuk merekam aktivitas kegiatan luar ruangan seperti lari, jalan, dll. Data berupa grafik statistik aktivitas kegiatan luar ruangan. Dilengkapi dengan fitur Running Plan, Running History, Fat Burning Report dan Health Report. Untuk memulai merekam klik "Start Exercising."

10. Analisa Citra Lidah

Fitur ini digunakan untuk melakukan analisa lidah secara mandiri. Untuk menggunakan fitur ini dengan cara mengambil foto lidah secara langsung atau dengan mengunggah fail lidah yang tersedia di peranti ponsel cerdas. Lakukan tes penilaian setelah berhasil mengunggah foto lidah. Hasil analisa berupa kecenderungan terhadap suatu penyakit termasuk COVID-19 berdasarkan 4 (empat) parameter (detak jantung, kadar oksigen dalam darah, suhu tubuh, dan TCM itu sendiri).

11. Rekam Medis

Fitur ini digunakan untuk mengunggah data medis, dapat berupa riwayat penyakit atau sejenisnya. Data medis akan digunakan untuk membantu analisa kesehatan.

12. Rumah Sakit Terdekat

Fitur ini digunakan untuk mengetahui informasi rumah sakit terdekat, sehingga dapat dilakukan pertolongan segera.

13. Panggilan Darurat

Fitur ini digunakan untuk melakukan panggilan darurat berdasarkan nomor telepon yang didaftarkan.

14. Geofencing

Fitur ini digunakan untuk melakukan pemantauan lokasi terhadap kondisi suhu abnormal dalam suatu wilayah dengan radius tertentu.

15. Tema

Dapat digunakan untuk melakukan penggantian latar tampilan jam pada smartwatch.

16. Pengingat Cerdas

Gunakan sebagai pengingat terkait medis, minum air, olahraga, alarm, dan aplikasi.

17. Laporan Kesehatan

Gunakan untuk mengetahui analisa kesehatan berdasarkan parameter medis aplikasi.

18. Manajemen Perangkat

Gunakan untuk melakukan pengelolaan atau pengaturan perangkat seperti:

- a. Kunci Layar
- b. Temukan jam
- c. Kontrol musik
- d. Remote Camera
- e. Electronic Fence
- f. Informasi firmware
- g. Lepaskan perangkat

19. Pengaturan

Gunakan untuk melakukan pengaturan umum seperti:

- a. Akun dan keamanan
- b. Unit
- c. Bahasa
- d. Tentang WISH
- e. Keluar aplikasi

20. Teledokter

Teledokter ini memudahkan pengguna untuk berkonsultasi dengan dokter baik melalui chat atau panggilan video melalui Aplikasi Kesehatan. Aplikasi Kesehatan di sini akan menjawab pertanyaan terkait kondisi kesehatan secara cepat dan tepat.

Cara Pemasangan WISH

- Cara Memasang Tali Pengikat/Karet WISH:
- Di setiap ujung tali pengikat terdapat batang logam kecil (spring bar)
- Tekan logam kecil tadi ke dalam lubang di mesin jam sampai dirasa sudah pas


Cara Pemakaian WISH

- Pilih pergelangan tangan yang paling nyaman
- Masukkan ujung tali pengikat ke dalam tali pengikat yang lain
- Pilih lubang yang dirasa paling nyaman
- Kaitkan lubang tali pengikat dengan kancing pengait dari tali pengikat sebaliknya

Cara menyingkronkan smartwatch dengan aplikasi di ponsel cerdas:

- Smartwatch WISH didukung dengan aplikasi WISH untuk memudahkan pemantauan data kesehatan. Pada dasarnya satu peranti smartwatch digunakan untuk satu aplikasi WISH.
- Unduh & pasang aplikasi WISH di Play Store/App Store, lalu berikan izin aplikasi untuk mendapatkan akses (GPS & Bluetooth)
- Lakukan registrasi dengan nomor ponsel atau email

Password login >



Sign Up


Email

Verification

Wish Term of Service
Legal notice and privacy policy

Sign up by mobile number

Password login >



Sign Up

Phone number

Verification

Wish Term of Service
Legal notice and privacy policy

Sign up by mobile number

- Ketikkan nama depan, nama belakang, password, serta informasi lain yang dibutuhkan
- Masukkan target langkah yang ingin dicapai

Target Steps


Help us customize the right exercise plan for you

Set the target of steps (steps)


The target number of steps is used to urge the daily exercise volume to reach the standart

Create Account

- Setelah tahapan tersebut, atur sinkronisasi Bluetooth agar jam terhubung dengan ponsel cerdas dengan menekan seksi "Connect" pada menu "Adjust"

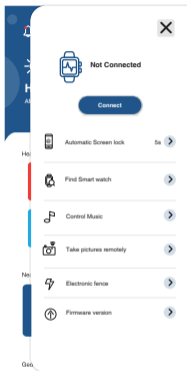


- Ketika pencarian Bluetooth smartwatch sudah ditemukan di aplikasi, pilih "Bluetooth Jam".
- Anda sudah berhasil menghubungkan smartwatch dengan aplikasi WISH

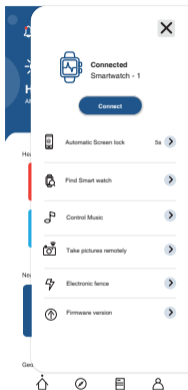

Petunjuk Penggunaan Fitur WISH

1. PEMANTAU TIDUR

Fitur ini dapat digunakan ketika pengguna smartwatch akan tidur. Smartwatch akan melakukan kalkulasi kualitas tidur Anda selama tertidur menggunakan smartwatch. Kalkulasi kualitas tidur akan tampil di menu "Explore" pada aplikasi WISH di ponsel cerdas dan buka menu seksi "Sleep Monitoring".

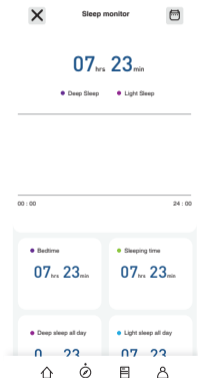

2. Temperatur Tubuh

Untuk menggunakan fitur temperatur tubuh, bisa melalui smartwatch atau melalui aplikasi WISH pada ponsel cerdas.

- Pada smartwatch geser layar ke atas atau ke bawah untuk menemukan logo temperatur.
- Tekan beberapa saat, kemudian lepas untuk mulai mengukur suhu tubuh.
- Tunggu untuk hasil pengukuran suhu tubuh.

3. Detak Jantung

Untuk menggunakan fitur detak jantung, bisa melalui smartwatch atau melalui aplikasi WISH pada ponsel cerdas.

- Pada smartwatch geser layar ke atas atau ke bawah untuk menemukan logo detak jantung.
- Tunggu beberapa saat untuk smartwatch memulai mengukur secara otomatis hasil untuk detak jantung.

4. Tekanan Darah

Untuk menggunakan fitur detak jantung, bisa melalui smartwatch atau melalui aplikasi WISH pada ponsel cerdas.

- Pada smartwatch geser layar ke atas atau ke bawah untuk menemukan logo tekanan darah.
- Tunggu beberapa saat untuk smartwatch memulai mengukur secara otomatis hasil untuk tekanan darah.

5. Kadar Oksigen Dalam Darah

Untuk menggunakan fitur kadar oksigen dalam darah, dapat melalui smartwatch atau melalui aplikasi WISH pada ponsel cerdas.

- Pada smartwatch geser layar ke atas atau ke bawah untuk menemukan logo kadar oksigen dalam darah.
- Tunggu beberapa saat sebelum smartwatch memulai mengukur secara otomatis hasil untuk kadar oksigen dalam darah.

6. Gula Darah

Untuk menggunakan fitur gula darah, dapat melalui smartwatch atau melalui aplikasi WISH pada ponsel cerdas.

- Pada smartwatch geser layar ke atas atau ke bawah untuk menemukan logo gula darah.
- Tunggu beberapa saat untuk smartwatch memulai mengukur secara otomatis hasil untuk gula darah.

7. Kolesterol

Untuk menggunakan fitur kolesterol, bisa melalui smartwatch atau melalui aplikasi WISH pada ponsel cerdas.

- Pada smartwatch geser layar ke atas atau ke bawah untuk menemukan logo kolesterol.
- Tunggu beberapa saat untuk smartwatch memulai pengukuran secara otomatis hasil kolesterol.

8. Tingkat Stres

Untuk menggunakan fitur tingkat stres, bisa melalui smartwatch atau melalui aplikasi WISH pada ponsel cerdas.

- Tunggu beberapa saat sebelum smartwatch memulai pengukuran secara otomatis hasil tingkat stres.

9. Olahraga

- Pilih ikon Olahraga.
- Pilih Run, Walk, Cycling, Swing, atau Fitness untuk menyudahiinya, tekan 3 detik pada layar dan pilih apakah hasil rekaman tersebut akan disimpan atau tidak.

10. Analisa Citra Lidah

Fitur ini hanya dapat dilakukan pada aplikasi WISH di ponsel cerdas.

- Pada halaman utama aplikasi pada seksi health check up pilih ikon atau seksi Analisa Citra Lidah.
- Kemudian klik ikon lidah pada untuk memulai deteksi.
- Pilih pengambilan gambar secara langsung atau melalui album, tunggu beberapa saat hingga hasil deteksi keluar.

11. Rekam Medis

Fitur ini hanya dapat dilakukan pada aplikasi WISH di ponsel cerdas.

- Masuk menu "Explore" pada ponsel cerdas dan buka seksi "Rekam Medis".

- Pilih ikon tambah (+) untuk mulai menambahkan catatan baru.
- Masukkan gambar rekam medis, dan keterangan penunjang yang dapat berguna.
- Pilih kategori Catatan, kemudian klik Simpan.

12. Rumah Sakit Terdekat

Fitur ini hanya dapat dilakukan pada aplikasi WISH di ponsel cerdas.

- Pada halaman utama aplikasi, geser untuk menemukan seksi "Rumah Sakit Terdekat".
- Klik salah satu Rumah Sakit untuk melihat lebih detail Rumah Sakit yang dipilih.
- Untuk melihat lebih banyak daftar rumah sakit, klik ikon "Lainnya" pada seksi "Rumah Sakit Terdekat".

13. Panggilan Darurat

Fitur ini hanya dapat dilakukan pada aplikasi WISH di ponsel cerdas.

- Untuk masuk ke menu Panggilan Darurat, klik dan tahan ikon notifikasi selama 3 detik.
- Pilih menu panggilan yang sesuai dengan keadaan darurat yang sedang terjadi.
- Jika keadaan sudah teratasi terlebih dahulu atau merupakan "false alarm", klik ikon "I'm safe".

14. Geofencing

Fitur ini hanya dapat dilakukan pada aplikasi WISH di ponsel cerdas.

- Pada halaman utama aplikasi, geser untuk menemukan seksi "Geofencing". Pada seksi Geofencing terdapat tampilan peta yang mendeteksi orang di sekitar pengguna dengan gejala suhu tubuh yang tidak wajar.
- Klik pada peta tersebut untuk masuk ke menu penuh Geofencing, pilih radius Geofencing.

15. Analisa Citra Lidah

Fitur ini hanya dapat dilakukan pada aplikasi WISH di ponsel cerdas. Masuk menu "Explore" pada ponsel cerdas dan buka seksi "Laporan Kesehatan".

- Pilih Pemindai Lidah.
- Pilih Ambil Gambar.
- Julurkan keseluruhan lidah agar dapat ditangkap gambar secara keseluruhan.
- Kemudian tunggu beberapa saat untuk mengetahui hasilnya.

16. Peningat Cerdas

Fitur ini hanya dapat dilakukan pada aplikasi WISH di ponsel cerdas.

- Masuk menu "Explore" pada ponsel cerdas dan buka seksi "Peningat Cerdas".
 - a. Peningat Minum Obat
 - Masuk menu Peningat Obat.
 - Pilih ikon tambah (+) untuk menambahkan pengingat baru.
 - Masukkan deskripsi obat.
 - Pilih "Waktu Obat" untuk mengatur jadwal minum obat.
 - Pilih "Jarak Peningat" untuk mengatur jarak waktu antar pengingat.
 - Pilih "Jumlah Obat" untuk mengatur jumlah obat yang perlu dikonsumsi.
 - Pilih menu "Ulangi" untuk mengatur pengulangan waktu pengingat.
 - Pilih "Simpan".
 - b. Peningat Minum
 - Masuk menu Peningat Minum.
 - Pilih ikon tambah (+) untuk menambahkan pengingat baru.
 - Masukkan deskripsi minuman yang akan dikonsumsi.
 - Pilih "Peningat Minum" untuk mengatur waktu.
 - Pilih "Jarak Peningat" untuk mengatur jarak waktu antar pengingat.
 - Pilih "Jumlah Minuman" untuk mengatur jumlah minuman yang perlu diminum.
 - Pilih menu "Ulangi" untuk mengatur pengulangan waktu pengingat.

- Pilih "Simpan".
- c. Peningat Olahraga
- Masuk menu "Peningat Olahraga".
 - Pilih ikon tambah (+) untuk menambahkan peningat baru.
 - Masukkan deskripsi olahraga yang akan dilakukan.
 - Pilih "Waktu Olahraga" untuk mengatur waktu olahraga yang akan dilakukan
 - Pilih "Jarak Peningat" untuk mengatur jarak waktu antar peningat.
 - Pilih menu "Ulangi" untuk mengatur pengulangan waktu peningat.
 - Pilih "Simpan".
- d. Sedentari
- Sedentari adalah kegiatan yang mengacu pada segala jenis aktivitas di luar waktu tidur dengan jumlah kalori terbakar yang sangat sedikit, seperti rebahan atau duduk. Sedentari perlu dibatasi karena perilaku ini berisiko memicu obesitas.
- Masuk ke menu "Sedentari".
 - Pilih ikon tambah (+) untuk menambahkan peningat baru.
 - Pilih "Mulai Waktu" untuk mengatur waktu mulai.
 - Pilih "Waktu Selesai" untuk mengatur waktu selesai.
 - Pilih "Jarak Peningat" untuk mengatur jarak waktu antar peningat.
 - Pilih menu "Ulangi" untuk mengatur pengulangan waktu peningat.
 - Pilih "Simpan".
- e. Alarm
- Masuk menu "Alarm".
 - Pilih ikon tambah (+) untuk menambahkan peningat baru.
 - Masukkan deskripsi peningat.
 - Tentukan waktu alarm akan aktif.

- Pilih menu "Ulangi" untuk mengatur pengulangan waktu pengingat.
 - Pilih "Simpan"
 - Aktifkan pengingat yang dipilih dengan menggeser tombol navigasi di sebelah deskripsi pengingat.
- f. Pengingat Aplikasi
- Aktifkan pengingat dengan menggeser tombol ke kiri untuk memunculkan pengingat aplikasi tersebut di smartwatch.

17. Manajer Perangkat

Fitur ini hanya dapat dilakukan pada aplikasi WISH di ponsel cerdas

- Pada menu utama maupun menu lainnya pilih ikon "Adjust" pada pojok kanan atas menu penghubung smartwatch.
- Pilih ikon "Connect/Disconnect" untuk menghubungkan atau memutus koneksi smartwatch dengan ponsel cerdas.
 - a. Pengunci layar otomatis
 - Pilih menu pengunci layar otomatis.
 - Tentukan berapa lama layar smartwatch akan mengunci setelah ditinggalkan.
 - Pilih "Simpan".
 - b. Pencari Smartwatch
 - Pilih menu "Pencari Smartwatch".
 - Pilih "Cari Perangkat" untuk memulai mencari perangkat.
 - Tunggu hingga hasil lokasi smartwatch tampil.
 - c. Pengontrol musik
 - Pilih menu "Pengontrol Musik".
 - Pilih aplikasi musik yang ada pada ponsel cerdas Anda
 - Kontrol musik sesuai keinginan Anda melalui smartwatch.
 - d. Pengontrol kamera
 - Pilih menu "Pengontrol Kamera".
 - Ambil gambar dari kamera ponsel Anda dengan

menggerakkan smartwatch Anda.

- e. Electronic fence
 - Pilih menu "Electronic Fence".
 - Anda dapat melihat radius electronic fence.
- f. Versi Firmware
 - Pilih menu "Firmware" untuk mengetahui versi firmware.
 - Pilih "Update" untuk pembaruan versi firmware.

Cara Melepas Jam Tangan

- Keluarkan kancing pengait dari lubang yang ada di tali pengikat.
- Lepaskan tali pengikat dari pengait di tali pengikat sebaliknya.

Cara Melepas Tali pengikat dari Jam

- Lepaskan batang kecil pada kait jam tangan.
- Keluarkan batang kecil tadi dari lubang yang ada di mesin jam.

Cara Mengisi Ulang Baterai

- Capitkan pengisi daya ke mesin/perangkat jam.
- Pada capitan pengisi daya terdapat gigi yang harus ditempatkan di 2 titik kuning di balik mesin/perangkat jam.

Note

- Pengisian penuh baterai membutuhkan waktu sekitar 1-2 jam.
- Hubungkan tali pengikat dengan jam pada sisi atas dan bawah.
- Bluetooth akan terputus ketika melebihi jarak. Ketika sambungan terputus beberapa fungsi tidak dapat tersinkronisasi seperti fitur pencarian jam.
- Harap hubungkan kembali dengan Bluetooth jika terputus. Hubungkan secara manual jika Bluetooth terputus selama 5 menit.
- Harap setuju permintaan akses Buku Telepon, GPS atau Lokasi, Kamera, Penyimpanan untuk melakukan optimalisasi fitur.
- Saat memainkan musik, informasi musik tidak ditampilkan

- Berikut ini adalah cara penyelesaian masalah umum untuk masalah jam, jika belum terselesaikan, silakan hubungi dealer atau petugas servis yang kami tunjuk.
 - Tidak dapat mengaktifkan jam. Waktu menekan tombol power terlalu singkat, mohon tahan lebih dari 3 detik. Daya rendah, harap isi daya jam tangan.
 - Mati secara otomatis. Daya rendah, harap isi daya jam tangan.
 - Waktu penggunaan yang singkat. Baterai tidak penuh, pastikan daya penuh (pengisian penuh membutuhkan setidaknya 2 jam).
 - Tidak dapat mengisi daya. Masa pakai baterai akan berkurang setelah beberapa tahun, periksa apakah baterai berfungsi. Ganti pengisi daya baru jika tidak bisa digunakan. Silakan periksa slot yang menghubungkan dengan baik, jika tidak, silakan coba lagi.
 - Tidak dapat menemukan Bluetooth. Pada saat menghubungkan, dekatkan jam dengan ponsel. Cobalah melakukan pencarian koneksi Bluetooth kembali.

Disclaimer:

Di luar box:

Produk ini tidak dimaksudkan untuk digunakan sebagai perangkat medis. Data hanya untuk referensi

Di dalam box:

Kami tidak memberikan jaminan apa pun tentang keakuratan informasi ini. Tindakan apa pun yang Anda lakukan atas informasi di perangkat ini sepenuhnya merupakan risiko sendiri, dan kami tidak akan bertanggung jawab atas kerugian dan kerusakan apa pun sehubungan dengan penggunaan perangkat kami. Dengan membeli, melisensikan, melihat, menggunakan dan/atau mengakses sistem, Anda mengetahui dan menyetujui bahwa sistem yang disediakan oleh WISH adalah: (i)

tidak disertifikasi sebagai perangkat medis; (ii) tidak dimaksudkan untuk penggunaan klinis atau diagnostik dan (iii) dimaksudkan hanya untuk referensi.

Anda selanjutnya mengetahui dan menyetujui akan menggunakan dan mengakses sistem (iv) hanya sehubungan dengan tujuan pelatihan medis dan peningkatan kinerja tersebut; (xi) mematuhi semua hukum dan peraturan yang berlaku; dan (v) sesuai dengan dokumentasi pengguna, manual instruksi, panduan dan/atau persyaratan yang kami sediakan untuk Anda. Sistem apa pun tidak boleh digunakan untuk (vi) mendiagnosis, merawat, atau menyembuhkan kondisi manusia atau dalam situasi yang menyelamatkan jiwa; (vii) mendukung keputusan medis profesional, diagnosis atau perawatan, atau (viii) mengganti diagnosis, rekomendasi, saran, perawatan atau keputusan oleh dokter yang terlatih dan berlisensi. Penggunaan sistem dengan subjek nyata dapat menyebabkan cedera serius atau kematian.

- **Perhatian**

WISH tidak membuat pernyataan atau jaminan serta tidak bertanggung jawab bahwa sistem dan informasi medis atau referensi yang diberikan pada sistem: (a) akan selalu tersedia, atau tersedia semua; atau (b) bebas dari kesalahan, lengkap, benar, akurat, mutakhir dan/atau tidak menyesatkan. Penggunaan Anda atas sistem adalah dengan pengetahuan dan kesadaran penuh bahwa Anda melepaskan klaim apa pun yang mungkin Anda miliki karena mengandalkan informasi atau pelatihan apa pun yang disajikan melalui sistem.

- **Batasan tanggung jawab**

Dalam hal apa pun WISH tidak akan bertanggung jawab atas kerugian penggunaan, hilangnya keuntungan, gangguan bisnis, atau kerusakan tidak langsung, khusus, insidental, hukuman, atau konsekuensial apa pun (termasuk hilangnya keuntungan), apa pun

bentuk tindakannya, baik dalam kontrak, kesalahan (termasuk kelalaian), tanggung jawab produk yang ketat, atau sebaliknya, bahkan jika WISH telah diberi tahu atau seharusnya menyadari kemungkinan kerusakan tersebut. Lebih lanjut, bahwa WISH juga tidak memiliki kewajiban apa pun mengenai kerusakan yang timbul dari atau terkait dengan akses, penggunaan dan/atau perubahan atau penghancuran yang tidak sah, oleh pihak ketiga mana pun, termasuk pengguna mana pun, dari sistem atau data apa pun yang terkandung di dalamnya atau dibuat oleh sistem atau sistem komputer Anda. Kebijakan ini dapat berubah terus menerus. Versi yang diperbarui akan diotorisasi jika tersedia di situs web kami.

Deskripsi Level Waterproof:

WISH ini dilengkapi dengan fitur tahan air atau waterproof level IP67

Spesifikasi WISH

Bluetooth Chip	nRF52832
Heart Rate Module	HRS 3300
Body Temperature Module	CT1711
Charging Voltage	5V
Screen Display	1.4 inch IPS
Batter Capacity	240mAh
Strap Material	Silica Gel
Watch Memory	512k
Touch Method	Fullscreen Touch
Motor	Built in, Vibration Alert
Charging Interface	USB Charging Clip Charging
Color Screen	Waterproof Rating IP67
Body Material	Zinc Alloy (vacuum plating)
Topside	2.5D Tempered Glass

Spesifikasi Ponsel Cerdas

Type of Software	Software Name
Android	
Bluetooth Version	BLE 5.0
The Bluetooth Chip	nRF52832
Charging Voltage	5 Volt
Battery Capacity	3000mAh
OS	Android 5 (Lollipop)
IOS	
Bluetooth Version	BLE 5.0
The Bluetooth Chip	nRF52832
Charging Voltage	5 Volt
Battery Capacity	3000mAh
OS	IOS 10

Ketentuan Garansi:

1. Garansi ini hanya berlaku untuk produk WISH yang datanya tercantum di dalam kartu Garansi ini.
2. Jangka waktu yang ditetapkan 6 bulan untuk sensor, layar, dan lampu LED sejak tanggal pembelian.
3. Garansi yang tercantum dalam Kartu Garansi ini hanya berlaku bagi pembeli pertama produk yang tercantum dalam kartu garansi ini dan tidak dapat dipindahtangankan ke siapa pun juga.
4. Kartu garansi hanya berlaku untuk kerusakan/kesalahan produksi yang dibuat oleh pabrik.
5. Reparasi atau perbaikan hanya dilakukan di alamat service center yang tercantum dengan menyertakan kartu garansi dan bukti pembelian yang dapat membuktikan tanggal dan tempat pembelian produk.
6. Jaminan hanya berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kartu garansi hanya berlaku apabila disertai informasi lengkap (Nama pelanggan, Nomor telepon, Tanggal Pembelian dll).
8. Kartu garansi tidak boleh rusak.
9. Garansi tidak berlaku untuk cangkang/bagian kosmetik luar, aksesoris lainnya, barang-barang yang habis terpakai (karet penutup, dll).
10. Garansi yang diberikan ini mencakup biaya jasa perbaikan dan penggantian alat atau suku cadang, tetapi tidak termasuk biaya pengiriman, transportasi, dan penanganan yang timbul karena pengiriman produk.
11. Semua informasi tentang garansi, ciri-ciri, dan spesifikasi produk dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
12. Keputusan Service Center perihal semua hal yang berhubungan dengan kerusakan, cara pembuatannya atau bahan produk adalah keputusan akhir dan menentukan, dan pembeli dengan ini setuju untuk mematuhi keputusan tersebut.

*Service center berhak menolak apabila ketentuan di atas tidak terpenuhi

Untuk informasi lebih lengkap bisa menghubungi:

Jakarta

Jl. Tangkas Baru Blok E No 2 RT.8 RW.2,
Karet Semanggi,
Setiabudi, Jakarta Selatan (12930)

Yogyakarta

Jl. Anggajaya 2 No. 105, Sanggrahan,
Condongcatur, Kec. Depok, Kabupaten
Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta,
55281

Gang Mawar 98D Jatirejo, Sendangadi,
Mlati, Sleman, Yogyakarta 55285

Email:
info@widyaimersif.com

No Telp:
+62 857 8888 7055, +62 811 318 7055